



Spot[®] Ex Endoszkópos marker

**Mérföldkő a
vastagbélrák elleni
küzdelemben**



- **Az irányelvek alkalmazását szélesebb körű indikációk támasztják alá¹**
- **Gyorsabb lokalizáció a nyomomkövetés során²**
- **Ex tra hatékonyság az új jellemzőknek köszönhetően**

Spot Ex Endoszkópos marker
Mérföldkő a vastagbélrák elleni
küzdelemben



¹ESGE Klinikai Irányelvek. Kolorektális polipektómia és endoszkópiás nyálkahártya reszekció (EMR). 2017

²A jelölés nélküli eljárásokhoz képest egyszerűbb a beazonosítás az utánkövetés során.

Spot[®] Ex: Az irányelvek alkalmazását szélesebb körű indikációk támasztják alá¹

Műtéti helymeghatározáshoz és klinikai megfigyeléshez¹

A Spot Ex tartós és a beteg akár 36 hónapon át¹ is nyomonkövethető

AJG

The American Journal of
Gastroenterology
Supplements

Az előöltött fecskendőben szállított steril karbonsuszpenziós endoszkópiás tetoválás tartós láthatósága

Jackson FW. Long-term Visibility of Endoscopic Tattoos Using Sterile Carbon Suspension in a Pre-filled Syringe. Am J Gastroenterol. 2017; 112:S1–S45.



SEED
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ENDOSCOPÍA DIGESTIVA

A vastagbélben helymeghatározáshoz használt endoszkópiás megjelölés tartósságának elemzése

Cano A, et al. Durability analysis of an endoscopic marker for the identification of locations in the colon. SEED. Toledo, Spain. 2017

A korábban Sport markerrel megjelölt 121 beteg nyomonkövetése során a jelölések 100 %-a még akár 11 évvel később is látható volt.²

A korábban Sport markerrel megjelölt 31 beteg nyomonkövetési vizsgálata során a jelölések 100 % - a akár még 10 évvel később is látható volt³

¹Spot Ex javallatok. Használati utasítások. G46-006 01-es átdolg. 2018 április

²Jackson FW. Az előöltött fecskendőben szállított steril karbonsuszpenziós endoszkópos marker hosszú távú láthatósága. Am J Gastroenterol. 2017; 112:S1–S45.

³Cano A. és társai. A vastagbél egyes helyeinek endoszkópos megjelöléseinek tartóssági elemzése. SEED. Toledo, Spain. 2017



“Kolonoszkópos jelölést végeztek kolonoszkópos vagy műtéti beavatkozás során, hogy a rosszindulatú léziók (akár tényleges akár gyanított), a polipektómia, az EMR-, vagy az ESD- területek, a nehezen felismerhető polipok vagy diszplázias területek később beazonosíthatóak legyenek
Az összes ilyen léziót, kivéve, ha nyilvánvalóan a coecumban, a Baugin billentyű közvetlen közelében vagy a végbél alsó szakaszán helyezkednek el, ajánlott megjelölni.”

Steril és biokompatibilis, előre csomagolt szuszpenzió
...Azzal, hogy a SPOT-ot kifejlesztették... hozzáférhetőbbé vált, használata egyszerűsödött, a beavatkozás biztonsága fokozódott.”



BRITISH SOCIETY OF
GASTROENTEROLOGY



Spot Ex jelölés a szakmai szervezetek javaslatára²

¹ Ferlitsch M, Moss A, Hassan C, és társai. Kolorektális polipektómia és endoszkópos nyálkahártya reszekció (EMR): ESGE Klinikai irányelvek. Endoscopy. 2017;49


² A szakmai szervezetek steril karbonrészcskés szuszpenziót javasolnak preferálható jelölőanyagként és a Spot Ex egy steril karbonrészcseke szuszpenzió.

Spot Ex: **Ex**tra gyors helymeghatározás nyomonkövetéskor

A Spot Ex gyorsan azonosítható¹



**Mert sötétebb,
mint a Spot²**


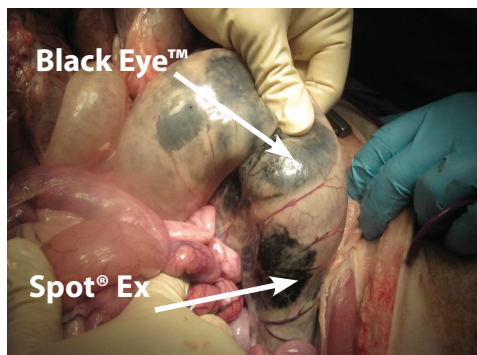


**30 % -kal sötétebb,
mint a Black Eye™²**

¹ Lee, P., Endoszkópos jelölések megtalálása: A kontrasztthatás. GI Supply. 2018.

² Spot Ex Luminosity Laboreredmények. Northwestern biológiai képzőintézet. 2017. novembere. A Black Eye™ a The Standard védjegye.

Spot Ex: **Ex**tra hatékonyság az új jellemzőknek köszönhetően

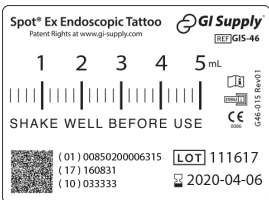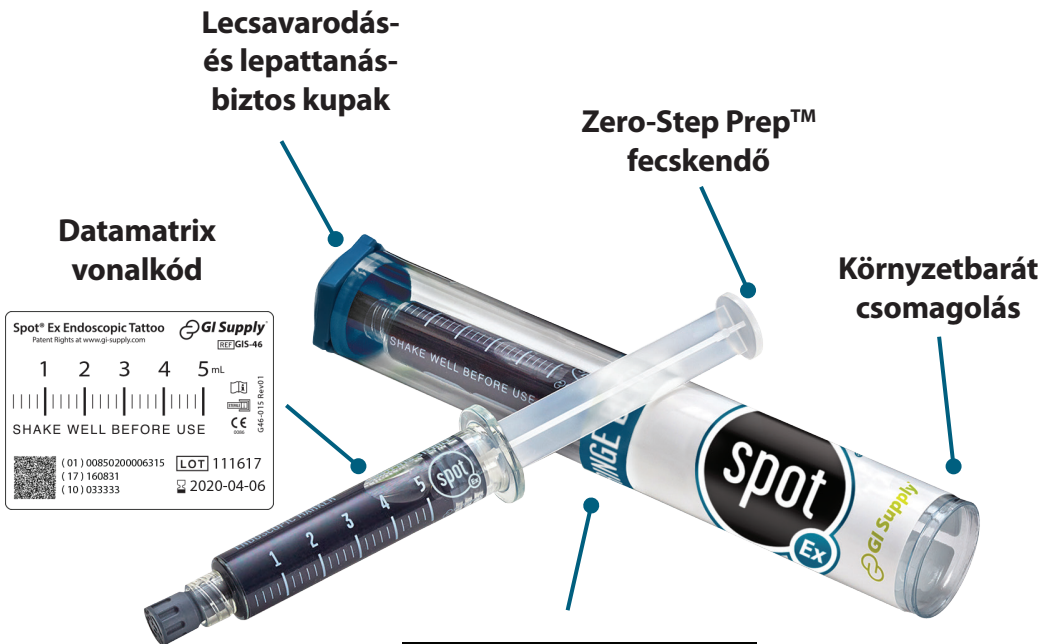

**Négy címke a
beteg adataihoz**

Tárolás

Felfelé állítva
vagy az oldalán
fektetve tárolható



Tárolja szobahőmérsékleten



2 éves eltarthatóság



Előkészítés

Rázza fel



Csatlakoztassa




Aktiválja
a fecskendő




Hogyan kezdünk hozzá?

Szubmukózus befecskendezés¹

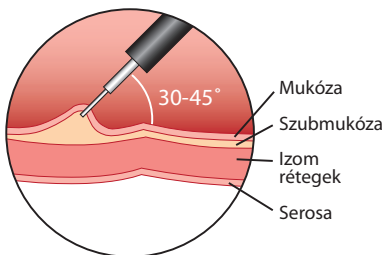


1. A tűt (lefelé az áramlás irányába), 2-3 cm-re a célterülettől helyezze el.²
2. A mucosára 30-45°-os szögben, érintőlegesen injektáljon.¹

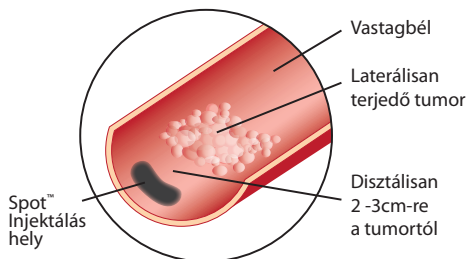

3. Mielőtt beinjektálná a Spot Ex-et, hozzon létre egy sóoldat bullát a submucosus réteg megtalálásához, ezzel csökkentve a transmuralis befecskendezés kockázatát.¹

4. A jó láthatóság érdekében a Spot Ex markert 3-4 kvadránsban helyezze el a lumen körül.¹

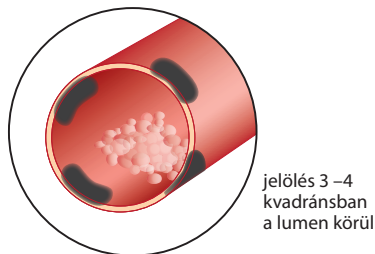

5. Injektálási pontonként 0,5-0,75 ml-t, betegenként pedig maximum 8 ml-t használjon.¹

¹ Spot Ex indikációk. Használati utasítás. G46-006 1-es átdolg. 2018 április

² Rex DK. A beteg biztonságának fokozása endoszkópos jelöléssel. Gastroenterology and Endoscopy News. 2015 May

A legjobb dokumentálási gyakorlat



- Beszámolóit szöveges és fényképes dokumentálással, világos terminológiát használva készítse el.
- Dokumentálja minden jelölés mélységi tartományát és pontos anatómiai helyét.
- Jelezze azt is, hogy a kezelt területen pontosan hol és hány jelölést ejtett.

Extra számú indok a Spot Ex mellett

	Spot Ex Endoscopic Tattoo GIS-46 	Black Eye™ Endoscopic Marker 
Indikációk	Klinikai megfigyelés, és sebészeti helymeghatározás	Sebészeti helymeghatározás
	36 hónap	30 nap
Kontraszt	30 %-kal sötétebb, mint a Black Eye	Standard
Használhatóság	Zero-Step Prep™ fecskendő, és lecsavarodás-biztos kupak	Standard
Környezetbarát csomagolás	Kevesebb csomagolási veszteség	Standard
Klinikai bizonyítékokon alapul	>25 publikált vizsgálat	Nem készült tanulmány
Az ESGE Irányelvek név szerint említik	Igen	Nem