



**Bellovac® ABT**  
YOUR OWN BLOOD™

## Egyszerűen a legjobb

*Bellovac® ABT a leggyakoribb választássá nőtte ki magát az autolog vér reinfúziója területén. Ez nem csak a biztonsággal és zárt rendszerrel társuló kiváló minőség miatt van így. Köszönhető ez az egyszerű és könnyű kezelhetőségének is, hiszen egy csomag tartalmazza mindazt, ami a vér gyűjtéséhez és reinfúziójához szükséges.*

### **A biztonság a legfontosabb**

Az autolog vér reinfúzióját posztoperatív vérzésnél ajánlják, főleg orthopédiai beavatkozásokat követően. A Bellovac ABT biztonságos és zárt rendszert biztosít három egyirányú szelepe révén. Így maximális biztonságot nyújt mind a beteg, mind pedig a kezelőszemélyzet részére.

### **Kedvelni fogja**

A Bellovac ABT-t éppen olyan egyszerű kezelni, mint amilyen egyszerűnek tűnik. Nem szükséges hozzá drága eszköz vagy különlegesen kiképzett személyzet. Kettős funkciójának köszönhetően nem szükséges plusz drénkészlet alkalmazása. Ha egyszer kipróbálja, megkedveli.

### **Minden egyben**

A Bellovac ABT szettben minden benne van, amivel rögtön használható. Tartalmaz nyársat és katétert, szívóharangot, autotranszfúziós zsákot és transzfúziós készletet. Valamennyi eleme (a nyárstól eltekintve) csak egyszeri használatra készült. A termékpalettán valamennyi tartozék külön is megtalálható.

# A Bellovac ABT felépítése

**Szorító a bemeneti csőhöz**

Biztonságos szorító. Könnyen, akár fél kézzel is használható.

**Három egyirányú szelep**

A beteg és a személyzet védelme érdekében a Bellovac ABT három egyirányú szeleppel rendelkezik. Egy a szívóharang bemeneténél, egy a kimeneténél és egy pedig az autotranszfúziós zsáknál helyezkedik el.

**Szívóharang**


A szívóharang maximum 200 ml-ig tölthető fel. Kezdeti negatív nyomása 90 mmHg/12 kPa.

**Szorító a kimeneti csőhöz**

Biztonságos szorító. Könnyen, akár fél kézzel is használható.

**Dupla szűrő**

Az autotranszfúziós zsáknál található egy 200 µ-os makrofilter és a transfúziós szettben pedig egy 40 µ-os mikrofilter.

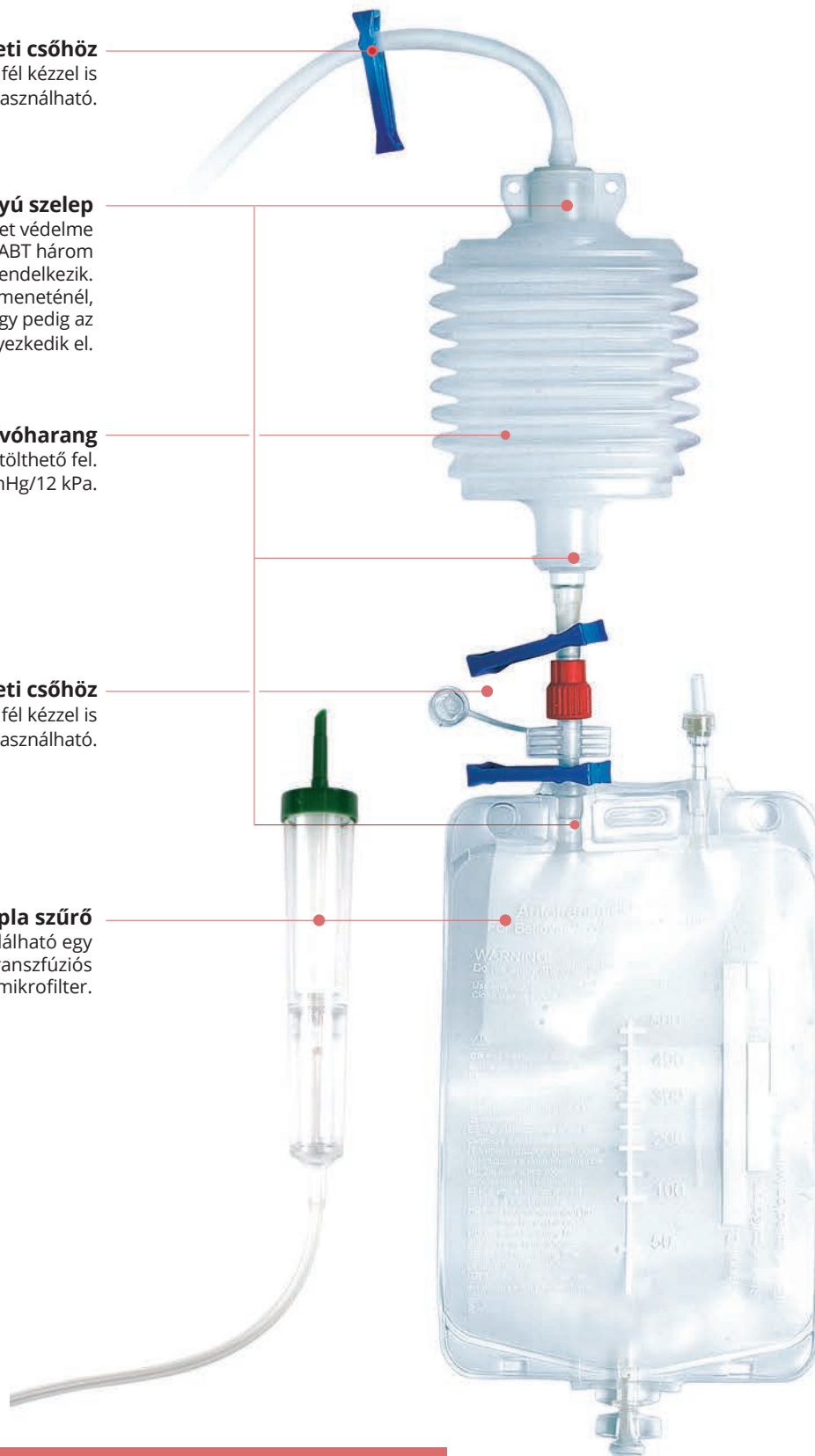

**Valamennyi alkotóelem biokompatibilis, pirogénmentes anyagból készült.**

# Bellovac ABT termékválaszték



## Komplett és használatra kész

A Bellovac® ABT szett teljesen és sterilen, egy egységnyi vér gyűjtésére és reinfúziójára kész állapotban kerül forgalomba.

## Ref. szám

68306 2x10  
68307 2x10  
68308 2x10

## Bellovac® ABT szett

Bellovac® ABT szett FG 10 trokárral  
Bellovac® ABT szett FG 14 trokárral  
Bellovac® ABT szett FG 18 trokárral



## Kiegészítő szett további gyűjtéshez és reinfúziójához

Amennyiben a beteg több mint 500 ml vért veszít, akkor ez az autotranszfúziós zsákot és transzfúziós készletet tartalmazó kiegészítő szett alkalmazható.

## Ref. szám

68309 4x5

## Bellovac® ABT tartozékok

Autotranszfúziós zsák (500 ml) és transzfúziós készlet



## Kiegészítő vezeték

Gondoskodik arról, hogy a beteg ne lépjen ki egy zárt körből, amelyre vallási okokból lehet szükség.

## Ref. szám

68380 4x5

Kiegészítő vezeték



## Drénszák

A műtét után hat órával a vérgyűjtési fázis befejeződik és a továbbiakban a standard drénszákot kell használni a sebdrenáláshoz.

## Ref. szám

68337 12x50

Drénszák - PVC-mentes

## Referenciák

Slappendel R et al. Acta Orthop Scand. 2003 Oct;74(5):569-75.

Weber EWG et al. Medical Thesis 2003: Optimized blood management for elective orthopaedic surgery. ISBN 90 5278 394 2.

Andersson I et al. Can J Anesth. 2001 Mar;48(3):251-5.

Moonen A.F. et al. Transfusion 2007 Mar;47(3):379-84.

## Egyéb tartozékok

Y csatlakozó és katéter FG 10  
Y csatlakozó és katéter FG 14  
Y csatlakozó és katéter FG 18  
Y csatlakozó és katéter FG 10, nyárssal  
Y csatlakozó és katéter FG 14, nyárssal  
Y csatlakozó és katéter FG 18, nyárssal

## Ref. szám

68376 4x25  
68377 4x25  
68378 4x25  
68385 4x25  
68386 4x25  
68387 4x25

# Bízzon a saját vérében

A homolog vér transfúziójának kockázata jól ismert. Nagyon gyakran hiány van vérből és a készleten lévő vért is inkább olyan esetekre tartalékolják, amikor más alternatíva nincs, például balesetekhez.

Autolog vért lehet nyerni predonációval, haemodilúcióval, intraoperatív és posztoperatív autotranszfúzióval.

A Bellovac ABT a beteg saját, a műtétet követően összegyűjtött vérének autolog transfúziójára szolgál.

**A Mediplast** egy olyan koncepciót takar, amely a termékekkel együtt átfogó segítséget és oktatást nyújt. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan első osztályú termékeket ajánlhatunk, amelyek kiállták az alapos teszteket és könnyen használhatók. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen, az autológ vértranszfúzióval kapcsolatos kérdésben. Örömeinkre szolgál, ha segítségére lehetünk.

**Forgalmazza**  
Dispomedic Kft.



1105 Budapest, Gitár u. 15.

Tel: +36 1 262 4227, +36 20 941 4688, +36 20 941 4785

E-mail: [info@dispomedic.hu](mailto:info@dispomedic.hu)

Web: [www.dispomedic.hu](http://www.dispomedic.hu)

# Bellovac® ABT

**YOUR OWN BLOOD™**