

Bellovac®

Exudrain®

Abdovac®

Drénkészletek



**Sebdrenáló készletek
teljes választéka különböző
igények kielégítésére**


Felhasználóbarát drénrendszer

Drenálás alacsony nyomáson

Miért ne választaná az alacsony vákuumos drenálást? Az alacsony vákuumos drénnek – amilyen a Wellspect HealthCare rendszeré – valóban sok előnye van.

- Hatékony szívás¹
- Kevesebb vérveszteség²
- Jobb drenálás³
- A drén hamarabb eltávolítható⁴
- Kevésbé szívja be a szöveteket⁵

Ha túl nagy vákuumot alkalmaznak, szöveteket és kisebb ereket szívhatnak be a drénbe, amellyel fokozott vérvesztést és a beteg számára kellemetlenséget okoznak. Az Wellspect HealthCare alacsony vákuumos drénjének segítségével igen hatékony a drenálás, de jóval kevesebb a probléma.⁶

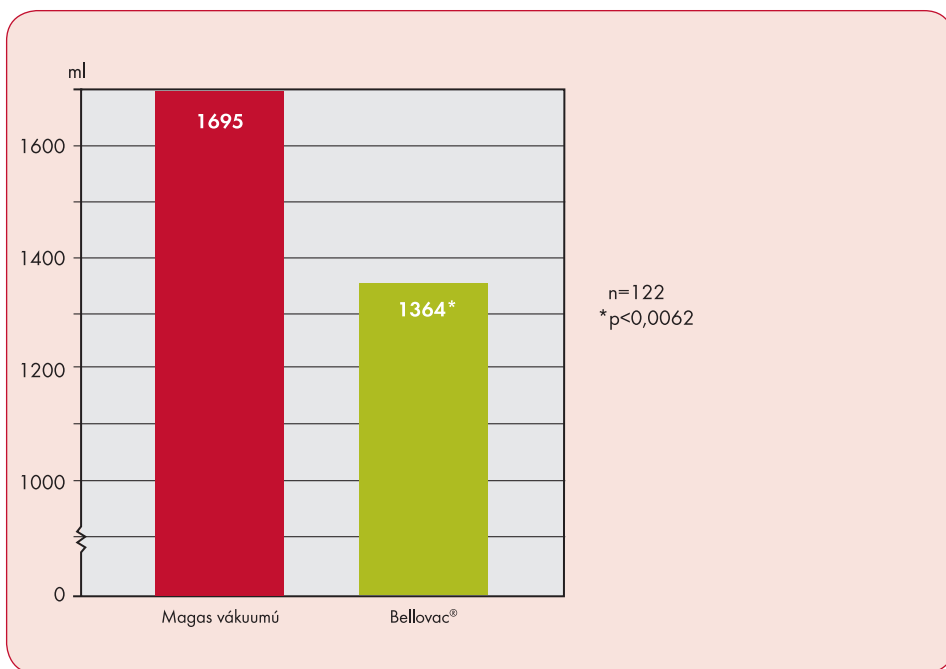


Kevesebb vérveszteség a Bellovac révén.²

Előnyös a beteg és a személyzet számára egyaránt

A Wellspect HealthCare drének teljesen zárt rendszert alkotnak, így jelentősen lecsökken a posztoperatív fertőzések kockázata és a kórházi tartózkodás ideje.

- A drenált folyadék a zárt rendszeren belül marad.
- A szívóharangban és a gyűjtőzsákban egyirányú szelepek vannak.
- Az egész rendszeren belül biztonságos minden csatlakozás.
- A beteg és a személyzet kontaminációjának minimálisra csökken a kockázata⁷.
- A drének használata elősegíti a színvonalas betegellátást és ápolást⁷.

A fenti tények alátámasztják, milyen sok előnnyel jár az alacsony vákuumos drenálás a beteg számára: kisebb a fájdalom, gyorsabb a sebgyógyulás és kevesebb napot kell kórházban tölteni. Ugye valóban felhasználóbarát megoldás?

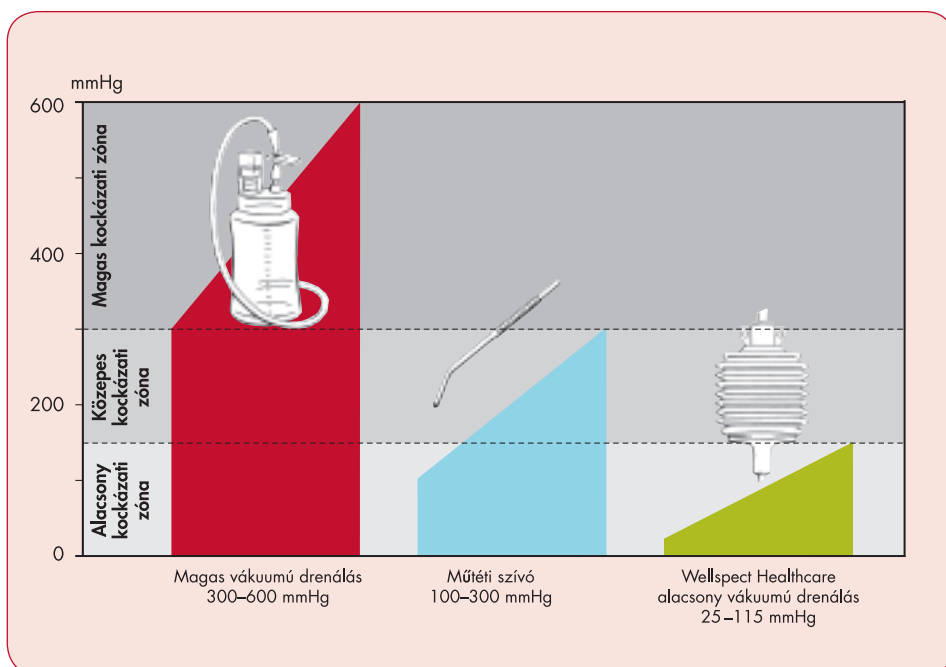

A magas vákuum – mint ami pl. az előre vákuumozott palackban van – szöveteket szívhat be a drénbe. A műtéti szívónál ennek a kockázata jóval kisebb.

Bellovac®

Exudrain®

Exudrain® Mini



Nagy volumenű drénkészlet

Max. szívási érték: 115 mmHg/15 kPa
Szívóharang volumene: 220 ml
Zsák volumene: 700 ml

Alkalmazási terület:

Orthopédia
Nőgyógyászat
Általános sebészet

Rend.szám	Megnevezés
68390	2x15 Bellovac® szett FG 10
68391	2x15 Bellovac® szett FG 14
68392	2x15 Bellovac® szett FG 18
68393	2x15 Bellovac® szett FG 10, nyárssal
68394	2x15 Bellovac® szett FG 14, nyárssal
68395	2x15 Bellovac® szett FG 18, nyárssal

Közepes volumenű drénkészlet

Max. szívási érték: 75 mmHg/10 kPa
Szívóharang volumene: 110 ml
Zsák volumene: 700 ml

Alkalmazási terület:

Általános sebészet
Emlőműtét ill. mastectomia
In situ sebdrénálás

Rend.szám	Megnevezés
68406	3x10 Exudrain® szett FG 10
68407	3x10 Exudrain® szett FG 14
68408	3x10 Exudrain® szett FG 18
68409	3x10 Exudrain® szett FG 10, nyárssal
68410	3x10 Exudrain® szett FG 14, nyárssal
68411	3x10 Exudrain® szett FG 18, nyárssal
68428	3x10 Exudrain® Passzív FG 10
68425	3x10 Exudrain® Passzív FG 14

Kis volumenű drénkészlet

Max. szívási érték: 75 mmHg/10 kPa
Szívóharang volumene: 110 ml

Alkalmazási terület:

Kézsebészet
Biopszia
Egynapos sebészet

Rend.szám	Megnevezés
68412	3x10 Exudrain® Mini szett FG 8
68419	3x10 Exudrain® Mini szett FG 8, nyárssal
68424	3x10 Exudrain® Mini szett FG 10

Abdovac®



Kíméletes szívóhatással rendelkező drén

Max. szívási érték: 25 mmHg/3,3 kPa

Szívóharang volumene: 110 ml

Zsák volumene: 700 ml

Alkalmazási terület:

Hasi sebészet

Rend.szám	Megnevezés
68413	3x10 Abdovac® szett FG 10
68414	3x10 Abdovac® szett FG 14
68415	3x10 Abdovac® szett FG 18
68416	3x10 Abdovac® szett FG 10, nyárssal
68417	3x10 Abdovac® szett FG 14, nyárssal
68418	3x10 Abdovac® szett FG 18, nyárssal

Tartozékok

Drénzsákok

Rend.szám		Megnevezés
68337	12x50	Drénzsák
68480	4x25	Steril drénzsák

Nyársak

Rend.szám		Megnevezés
68325	1	Nyárs FG 8
68328	1	Nyárs FG 10
68330	1	Nyárs FG 14
68331	1	Nyárs FG 18

Y elosztók

Rend.szám		Megnevezés
68376	4x25	Y elosztó FG10 katéterrel
68377	4x25	Y elosztó FG14 katéterrel
68378	4x25	Y elosztó FG18 katéterrel
68385	4x25	Y elosztó FG10 katéterrel, nyárssal
68386	4x25	Y elosztó FG14 katéterrel, nyárssal
68387	4x25	Y elosztó FG18 katéterrel, nyárssal

Szilikon drének

Rend.szám		Megnevezés
68367	4x15	Kerek dréncső FG 10, nyárssal
68368	4x15	Kerek dréncső FG 14, nyárssal
68369	4x15	Kerek dréncső FG 18, nyárssal
68361	4x15	Lapos dréncső FG 14, 7 mm; nyárssal
68362	4x15	Lapos dréncső FG 14, 10 mm; nyárssal

Hornyos drén

Rend.szám		Megnevezés
68460	4x15	Kerek hornyos drén FG 10, nyárssal
68461	4x15	Kerek hornyos drén FG 14, nyárssal
68462	4x15	Kerek hornyos drén FG 18, nyárssal
68463	4x15	Lapos hornyos drén FG 14; 7 mm; nyárssal
68464	4x15	Lapos hornyos drén FG 14; 10 mm; nyárssal

Referenciák

1. Loder P, Smith G et al, Aust. NZ J, Surg, 1987;57:531-35.
2. Morgan-Jones RL, Perko M MJ, Cross M, The Knee, 2000;7:149-50.
3. Giordano G, Abib A, Presented as a poster at Chirurgie de la Hanche – Hip Surgery Developments & Future prospects, Sep 1999.
4. Van Heurn LW E, Brink P R G, British Journal of Surgery, 1995;82:931-32.
5. Gergoss H and Marquardt K, Chirurg, 1992;63:447-53.
6. Seely M F, Br J Surg, 1979;66:657-59.
7. Zerbe M, Mc Ardie A, Goldrick B, Am. Journal of Infection Control, 1996;24(5):346-52.

CE
0086

STERILE EO

Latex free



DEHP Free



Különböző sebészeti beavatkozásokhoz különböző drénekre van szükség.

Könnyen kezelhető drének

Használatuk egyszerű



Wellspect HealthCare alacsony vákuumú drénjeit nagyon egyszerű használni. Nincs szükség drága eszközök megvásárlására, vagy különlegesen kiképzett személyzetre. A szívóharangok, valamint azok bemeneti és kimeneti oldalánál található egyirányú szelepei könnyű kezelést tesznek lehetővé és folyamatosan időt takarítanak meg a kezelő személyzet számára. Kompletten, sterilen kerülnek forgalomba.



Az Wellspect HealthCare drénjei biztonságosak, könnyen kezelhetőek és jól áttekinthetőek


Széleskörű választék a különböző igények kielégítésére



Az Wellspect HealthCare drénválasztékát a különböző sebészeti beavatkozások igényeihez igazították, hogy optimalizálják a zökkenőmentes és gyors gyógyulás lehetőségét. Mindegyik szett más tulajdonságokkal rendelkezik. Termékválasztékunkban mindig megtalálható egy olyan drén, amely az Ön igényeit kielégíti, legyen szó akár volumenkapacitásról vagy szívóhatásról.

Bellovac[®]
Exudrain[®]
Abdovac[®]

Drénkészletek

 **Wellspect HealthCare** egy olyan koncepciót takar, amely a termékekkel együtt átfogó segítséget és oktatást nyújt. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan elsőosztályú termékeket ajánlhatunk, amelyek kiállták az alapos teszteket és könnyen használhatók. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen, a drénkészletekkel kapcsolatos kérdésben. Örömmel szolgálunk, ha segítségére lehetünk.

DISTRIBUTOR



Dispomedic Kft, 1105 Budapest, Gitár u.15
Tel: (1) 262-4227, 20/9414-688
Fax: (1) 262-4227
E-mail: info@dispomedic.hu

Wellspect HealthCare

Export Department, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Svedorszag
Phone: +46 31 376 40 00. E-mail: export@wellspect-healthcare.com
www.wellspect-healthcare.com

wellspect
HEALTHCARE