

# clinell®

www.dispomedic.hu

2 perc alatt  
pusztítja el  
a spórák legalább  
**99,9999%-át**

## CLINELL

# PERECETSAVAS TÖRLŐKENDŐK

## A KLINIKAILAG LEGJOBBAN BEVIZSGÁLT FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ A VILÁGON

### Hatékony a száraz biofilm ellen

A Clinell Percetsavas törlőkendők hatékonyan eltávolítják a száraz biofilm kórokozóit, valamint megakadályozzák az átvitelüket és a regenerációjukat.

### Biztonságos és könnyen használható

A száraz kendőben lévő poralakú anyagot vízzel lehet aktiválni, így nem fordul elő hígítási hiba. Aktiválásakor nem keletkeznek mérgező gőzök, így biztonságosan használhatók betegek mellett.

### Klinikailag legjobban vizsgált törlőkendő

A Clinell Percetsavas törlőkendők nem szelektív hatással pusztítják el a legtöbb ismert patogén mikroorganizmust. Bizonyítottan 6 log spóraszám csökkentéssel, szennyezett körülmények között is 2 perc alatt, bizonyítottan felülmúlja a többi vezető sporicid törlőkendőt.

### Gyors és hatékony erősen szennyezett körülmények között is

Hatékonyabb, mint a klórral történő kétlépcsős tisztítás és fertőtlenítés. Lehetővé teszi mind a tisztítást, mind a fertőtlenítést és hatékony marad erősen szennyezett körülmények között is, ellentétben a klór alapú termékekkel.

### Kompatibilis a legtöbb felülettel

A közel semleges pH-jú Clinell Percetsavas törlőkendők korrózió mentesen használhatók a legtöbb nem-invazív orvosi eszközön és berendezésen.

### Szabadalmaztatott formula

A Clinell Percetsavas törlőkendők CE tanúsítvánnyal rendelkező, IIa osztályba tartozó orvosi eszközök, amelyek egyedi porkombinációt tartalmaznak, hogy igény szerint percetsavat képezzenek víz hozzáadásával.

# MIÉRT VÁLASSZA A CLINELL PERECETSAVAS TÖRLŐKENDŐT?

A helyiségek felületeinek tökéletesített tisztítása és fertőtlenítése csökkenti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kockázatát.

## Hatékony sporocid szerek

Indokolt a *C. difficile* baktériummal fertőzött betegeket ellátó helyiségek környezetének sporocid termékekkel való fokozott tisztítása. A *C. difficile* baktérium átvitel megelőzésének kulcsfontosságú intézkedései közé tartozik a kórházi helyiségek felületeinek napi és a beteg elbocsátásakor történő megfelelő tisztítása és fertőtlenítése. A *C. difficile*-vel fertőzött területek hatékony fertőtlenítéséhez elengedhetetlen a sporocid termék használata és a megfelelő gyakorlat.

### SPOROCID HATÁS ÉS ANTI-BIOFILM


A kvaternális ammónium vegyületeket sporisztikusnak nevezik, ami azt jelenti, hogy csak a spórák csírázását és/vagy szaporodását gátolják. A Clinell Percetsavas törlőkendők oxidálószer, perecetsavat hoznak létre, amely egy jól ismert sporocid szer. A Clinell Percetsavas törlőkendők a száraz biofilmek ellen is hatékonyak bizonyulnak.

### TOXIKOLÓGIAI VESZÉLYEK


A tablettákból és porokból készült klórolatok veszélyesek a felhasználóra és a betegekre egyaránt: mérgező gázokat és melléktermékeket bocsátanak ki. Kimutatták, hogy a klór légúti-, orr-, bőr- és szempanaszokat okoz.

### A KLÓR HATÁSTALAN


Az egylépéses fertőtlenítő kendők hatékonyabbak, mint a kétlépcsős tisztítás és fertőtlenítés klórral. Klóroltat készítésekor a koncentráció esetleg nem megfelelő, ami gyenge és hatástalan fertőtlenítésszer eredményezhet, valamint mérgező a személyzetre, a betegekre és az anyagokra.

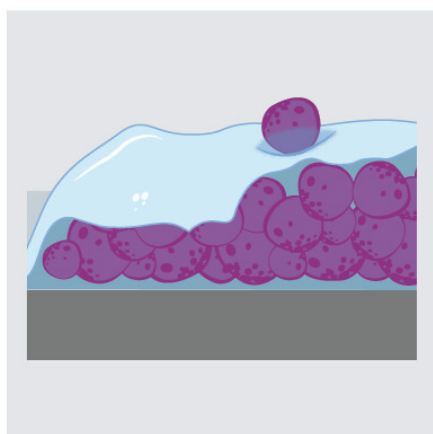

A biofilm képződés védelmet és tápanyagot biztosít a mikroorganizmusok számára, lehetővé téve számukra az ellenséges környezetben való túlélést.

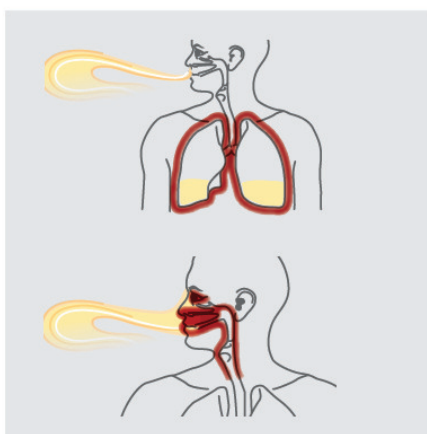

A klórgáz tüdőkárosodást, szem irritációt, orr- és torokkárosodást, köhögést és légszomjat okoz.

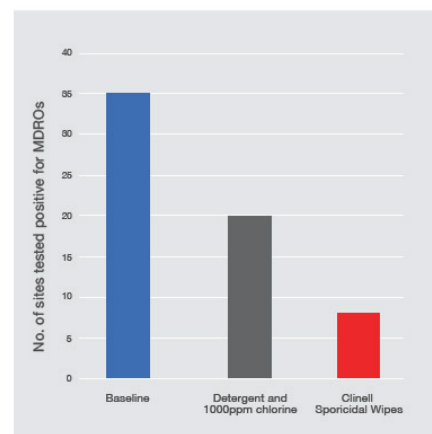

A Clinell Percetsavas törlőkendők hatékonyabban csökkentik a többszörösen gyógyszerrezisztens organizmusok jelenlétét, mint a kétlépcsős tisztítás és fertőtlenítés klórral.

## A klór tartós belélegzése megnövelheti a tüdőfibrózis kockázatát

# Bizonyítottan 72%-kal csökkenti a *C. difficile* baktériummal összefüggő betegségeket

Percetsavat generáló törلőkendők vízzel aktiválva, felületfertőtlenítéshez és nem-invazív orvosi eszközök tisztításához.



## Clinell peracetsavas törلőkendők

A szabadalmaztatott technológiát tartalmazó törلőkendőket nem-invazív orvosi eszközök minden felületén történő használatra tervezték. Vízzel történő aktiváláskor a peracetsav szintje olyan, amely bizonyítottan elpusztítja a legtöbb mikroorganizmust, beleértve a száraz biofilm kórokozóit is.

A Clinell Percetsavas törلőkendők magas minőségi tulajdonságokkal rendelkező fertőtlenítőkendők, amelyek rendkívül

hatékonyak a *C. difficile* spórák ellen. Tisztítanak és fertőtlenítenek, hatékonyabb és biztonságosabb alternatívát kínálva a kétlépcsős mosószeres tisztításnak, amelyet klóroldattal végzett fertőtlenítés követ.


### ANTIMIKROBIÁLIS AKTIVITÁS

Erőteljes fertőtlenítő készítmény pH optimalizált peracetsav és hidrogén-peroxid kombinációval, nátrium-perkarbonáttól és tetra-acetil-etilén-diaminból.


Nagy teljesítményű oxidatív ölő hatás minden mikroorganizmussal szemben, beleértve a nem burkos vírusokat, bakteriális endospórákat és a száraz biofilmet.

Megfelel az EN1276, EN13704, EN14348, EN14476, EN14561, EN14562, EN14563 és az EN16615 irányelveknek.

| BAKTÉRIUMOK                  | TESZT         | BEHATÁSI IDŐ                 |
|------------------------------|---------------|------------------------------|
| Acinetobacter baumannii      | EN13727       | 10 sec                       |
| Escherichia coli             | EN13727       | 10 sec                       |
| Pseudomonas aeruginosa       | EN13727       | 10 sec                       |
|                              | EN1456        | 11 min                       |
| Staphylococcus aureus        | EN13727       | 10 sec                       |
|                              | EN14561       | 1 min                        |
| Enterococcus hirae           | EN13727       | 10 sec                       |
|                              | EN14561       | 1 min                        |
|                              | EN13727       | 10 sec                       |
| Klebsiella pneumoniae (ESBL) | EN13727       | 10 sec                       |
| Enterococcus faecalis        | ASTM E2967-15 | Wiping 10 sec, contact 2 min |
| Dry Biofilms                 |               |                              |
| <b>SPÓRÁK</b>                |               |                              |
| Clostridium difficile        | EN13704       | 2 min                        |
|                              | ASTM E2362-09 | 2 min                        |
|                              | EN13704       | 2 min                        |
| Bacillus subtilis            |               |                              |
| <b>MYCOBAKTÉRIUMOK</b>       |               |                              |
| Mycobacterium terrae         | EN14348       | 2 min                        |
| Mycobacterium avium          | EN14348       | 2 min                        |
| <b>GOMBÁK</b>                |               |                              |
| Candida auris                | EN13624       | 10 sec                       |
| <b>VÍRUSOK</b>               |               |                              |
| Adenovirus                   | EN14476       | 1 min                        |
| Human coronavirus (MERS-CoV) | EN14476       | 1 min                        |
| Canine parvovirus            | EN14675       | 2 min                        |

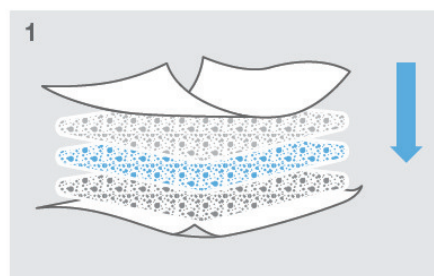

A törلőkendő aktiválás előtt száraz. Minden törلőkendő két réteg nem szőtt anyagból áll, amelyek a középső rétegben egyedi porkombinációval vannak összekötve.

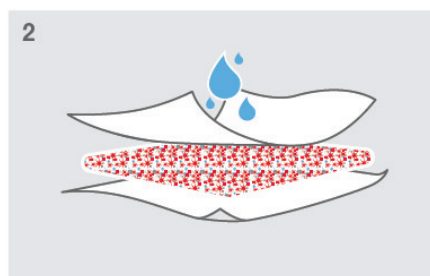

A víz aktiválja a port, ezáltal magas hidrogén-peroxid és peracetsav szintet hozva létre.



Az egyedülálló alkalmazási mód egyenletes hatékonyságot biztosít, higítási hibák nélkül.

| TEREMÉK                        | KISZERELÉS         | RENDELÉSI KÓD |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Clinell Percetsavas Törلőkendő | 25 db kendő/csomag | CS25          |

CE 0050

CE MINŐSÍTETT ORVOSI ESZKÖZÖK A IIA DIREKTÍVA SZERINT.

Gyártja  
GAMA Healthcare Ltd.

The Maylands Building, Mayland Avenue,  
Hemel Hempstead Industrial Estate,  
Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7TG UK

**gama**  
healthcare

Forgalmazza  
Dispomedic Kft.

1105 Budapest, Gitár u. 15.  
Tel: +36 1 262 4227, +36 20 941 4688, +36 20 941 4785  
E-mail: info@dispomedic.hu Web: www.dispomedic.hu

**DISPOMEDIC**  
EGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK