

# clinell®

www.dispomedic.hu

Elpusztítja  
a norovírus

99,99%-át  
1 perc alatt

## CLINELL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐKENDŐK

A leghatásosabb univerzális formula a piacon

### A leghatásosabb univerzális formula a piacon

A különböző hatásmechanizmussal rendelkező biocidek keveréke megakadályozza a baktériumok rezisztenciáját és a superbug-ok kialakulását.

### Sokféle célra használható

Tisztít és fertőtlenít egyben, így nem szükséges különböző kendők és felülettisztítók használata.

### Dermatológiaiailag tesztelt

Biztonságosan használható. Nem okoz irritációt vagy túlérzékenységet.

**Bizonyított hatékonyság a kórokozók ellen:** MRSA, *Acinetobacter*, VRE, *Klebsiella*, *Pseudomonas*, Norovírus, Hepatitis B és C és sok más kórokozó ellen.

### CE tanúsítvánnyal rendelkező, IIa osztályba tartozó orvostechnikai eszközök

A vödrös és a hengeres kiszerezésű kendők, valamint a 200 db-os kiszerezésű kendők IIa osztályba tartozó orvostechnikai eszközöknek minősülnek az Orvostechnikai eszközökre vonatkozó Irányelvnek megfelelően.

### Nem károsítja a felületeket és az eszközöket

A közel semleges pH-jú Clinell Univerzális Fertőtlenítőkendők ideálisan alkalmazhatók matracok letörlésére és biztonsággal használhatók gumi, műanyag és fém felületeken is.

### Egyszerű, könnyű, megbízható

Nem fordul elő hígítási hiba: mindig a helyes koncentráció áll rendelkezésre.

### Költséghatékony

Pénzt lehet vele megtakarítani, hiszen többféle tisztítószer is kivált.

# UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐKENDŐK

Az Univerzális kendők különleges, szabadalmaztatott formulája a piac leghatékonyabb nedves törlőkendőjévé teszik. A biocidok kombinációja kiváló hatékonyságú fertőtlenítőként működik, ezzel biztosítva, hogy hosszabb ideig történő alkalmazás mellett se alakuljon ki mikrobiális rezisztencia.



## Antimikrobiális aktivitás

A hatékony szabadalmaztatott biocid formula a kvaternális ammónium összetevők és egy polimer biguanide szinergikus elegyén alapszik – mindegyik teljesen különböző mechanizmussal rendelkezik. Ez biztosítja a legszélesebb hatásspektrumot, miközben megakadályozza a rezisztencia kialakulását.

A formula biocid hatással rendelkezik az alábbi kórokozókkal szemben:

### GRAM-POZITÍV BAKTÉRIUMOK

Beleértve a *Staphylococcus aureus*-t és az MRSA-t, az *Enterococcus*-okat és a VRE-t.

### GRAM-NEGATÍV BAKTÉRIUMOK

Beleértve a *Pseudomonas*-t, az *E. coli*-t, az *Acinetobacter*-t és a *Klebsiella*-t.

### GOMBÁK

Beleértve a *Candida Albicans*-t.

### MYCOBAKTÉRIUMOK

Beleértve a *Mycobacterium bovis*-t.

### BURKOS VÍRUSOK

Beleértve a MERS-CoV, a Hepatitis B és C és a H1V vírusokat.

### NEM BURKOS VÍRUSOK

Beleértve a Norovírust.

| BACTERIA                            | TEST       |
|-------------------------------------|------------|
| <i>Acinetobacter baumannii</i>      | EN 13727   |
| <i>Escherichia coli (E. coli)</i>   | EN 13727   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>       | EN 13727   |
| <i>Staphylococcus aureus (MRSA)</i> | EN 13727   |
| <i>Enterococcus hirae</i>           | EN 13727   |
| <i>Klebsiella pneumoniae (ESBL)</i> | EN 13727   |
| <i>Enterococcus faecalis</i>        | EN 13727   |
| <i>Enterococcus faecium (VRE)</i>   | EN 13727   |
| MYCOBACTERIA                        |            |
| <i>Mycobacterium bovis</i>          | EN 14348   |
| FUNGI                               |            |
| <i>Candida albicans</i>             | EN 13624   |
| VIRUSES                             |            |
| Norovirus                           | EN 14476   |
| HIV                                 | EN 14476   |
| Hepatitis B                         | ASTM E1052 |
| Hepatitis C                         | EN 14476   |
| MERS-CoV                            | EN 14476   |

## Behatási idő

A behatási idő az az idő, amennyire ahhoz van szükség, hogy egy fertőtlenítőszer érintkezzen egy mikroorganizmussal és elpusztítsa azt.

Ha egy fertőtlenítőszerről azt állítják, hogy 1 perc alatt elpusztítja az MRSA 99,9%-át, akkor ahhoz, hogy elpusztítsa a baktériumokat a felületnek legalább 1 percig láthatóan nedvesnek kell maradnia. Ez teszi lehetővé, hogy a fertőtlenítőszer érintkezzen a mikroorganizmussal.

A fertőtlenítőkendők használatakor fontos, hogy hagyjuk a felületet a levegőn megszáradni és soha ne manuálisan szárítsuk meg azt.

Azon termékek, amelyeknél irreális behatási időt adnak meg, nem feltétlenül hatékonyak reális körülmények között. A Clinell szigorú teszteléseket végzett, hogy bizonyítsa a behatási időkre és a kórokozók elpusztításának hatékonyságára vonatkozó állításokat reális körülmények között.



# Kendők felületek fertőtlenítésére és nem invazív orvosi eszközök tisztítására



## Nem invazív orvosi eszközök – felület és eszköz tisztítására

A Clinell Univerzális fertőtlenítőkendők CE minősítéssel rendelkeznek és az alábbi felületek és eszközök tisztítására és fertőtlenítésére használhatók. Ezek a felületek ritkán vannak tisztítva és kimutatták, hogy fertőzést okoznak. Lista a teljesség igénye nélkül:

- ultrahang készülékek
- doppler szondák
- vérnyomásmérő készülékek
- vérnyomásmérő mandzsetták
- pulzoximéter szondák
- sztetoszkópok
- radiológiai berendezések
- EKG készülékek
- monitorok
- inkubátorok

CE 0050


**CE TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ, IIA OSZTÁLYBA TARTOZÓ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK** – a vödrös kiszorítás (és utántöltő), a hengeres kiszorítás (és utántöltő), az 500 ml spray és a 200 db-os kiszorítású kendők mind IIA osztályba tartozó orvostechnikai eszközöknek minősülnek.

## Felületek hatékony tisztításának folyamata


### KENDŐK:



Végezzen kockázatértékelést. Ajánlott védőfelszerelést viselni. Vegyen ki egy kendőt a csomagból.

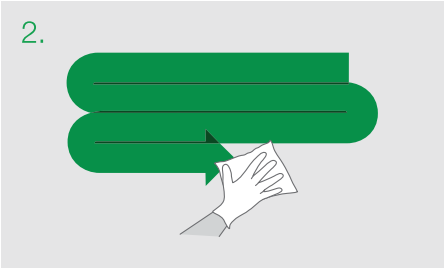


Haladjon a tisztától a koszos irányába „S” kanyarokat leírva a kendővel. Ne térjen vissza a már megtisztított felületre még egyszer.

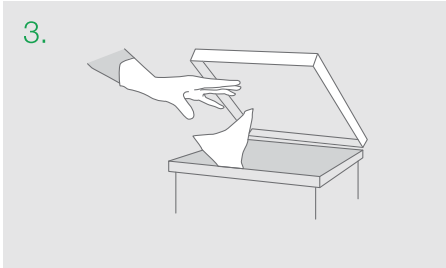


Cseréljen kendőt, ha az kiszáradt vagy elhasználódott és dobja ki egy megfelelő hulladékátrolóba. Hagyja a felületet a levegőn megszáradni.


### SPRAY:

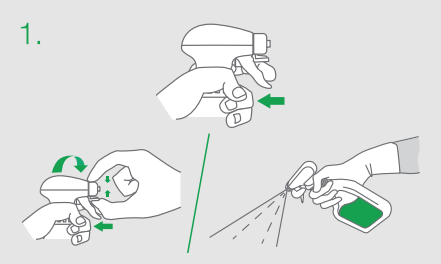

Kissé húzza meg a kioldót, hogy kinyíljon. Miközben meghúzza a kioldót szorítsa össze és fordítsa a fúvókát a felületre. Permetezzen egyenletesen a felületre.

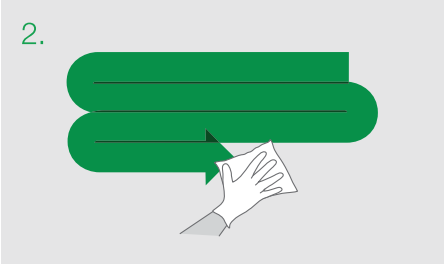

Haladjon a tisztától a koszos irányába „S” kanyarokat leírva a kendővel. Ne térjen vissza a már megtisztított felületre még egyszer.

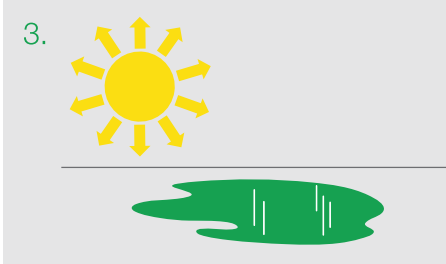

Hagyja a felületet a levegőn megszáradni.



# FELÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE ÉS NEM INVAZÍV ORVOSI ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Bizonyítottan elpusztítja a kórokozók legalább **99,99%**-át, 10 másodperc után kifejti hatását.



A Clinell Univerzális Fertőtlenítőkendők és a Clinell Univerzális Spray a nem invazív orvosi eszközök fertőtlenítésére és tisztítására alkalmas.

| TERMÉK                                                     | KISZERELÉS             | RENDELÉSI KÓD |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Univerzális Fertőtlenítő Törölkendő 40                     | 40 db kendő/csomag     | CW40          |
| Univerzális Fertőtlenítő Törölkendő 200                    | 200 db kendő/csomag    | CW200         |
| Univerzális Fertőtlenítő Törölkendő hengeres 100           | 100 db kendő/henger    | CWTUB100      |
| Univerzális Fertőtlenítő Törölkendő hengeres utántöltő 100 | 100 db kendő/utántöltő | CWTUB100R     |
| Univerzális Fertőtlenítő Törölkendő vödrös 225             | 225 db kendő/vödör     | CWBUC225      |
| Univerzális Fertőtlenítő Törölkendő vödrös utántöltő 225   | 225 db kendő/utántöltő | CWBUC225R     |
| Univerzális Spray 500                                      | 500 ml spray/ palack   | CDS500        |

### REFERENCIÁK

1. According to EN 14476.

2. Bloomfield SF. Significance of biocide usage and antimicrobial resistance in domiciliary environments. Journal of Applied Microbiology. 2002;92(s1).

3. The Design Council. Case study. Design bugs out. [Available from <http://www.designcouncil.org.uk/resources/case-study/design-bugs-out>]

4. Sanders S. The stethoscope and cross-infection. Br J Gen Pract. 2003 Dec;53(497):971-2.

5. Cohen SR, McCormack DJ, Youkhana A, Wall R. Bacterial colonization of stethoscopes and the effect of cleaning. J Hosp Infect. 2003 Nov;55(3):236-7.
6. Buus-Frank, M.E. Hands that heal-hands that harm. Advances in Neonatal Care 2004. Oct;4:5:251-255.

7. Bureau-Chalot F, Drieux L, Pierrat-Solans C, Forte D, de Champs C, Bajelet O. Blood pressure cuffs as potential reservoirs of extended-spectrum  $\beta$ -lactamase VEB-1-producing isolates of Acinetobacter baumannii. Journal of Hospital Infection. 2004 Sep 30;58(1):91-2.

8. Lobaz S, Diddle R, Collins J, White D. Pathogenic colonisation of hospital badges and neck lanyards in the anaesthetic/ theatre environment. Anaesthesia. 2012 Feb 1;67:44.

**CE 0050** Class IIa Medical Device  
CE TANÚSÍTÁNNYAL RENDELKEZŐ, IIA OSZTÁLYBA TARTOZÓ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK

**HASZNÁLJA A FERTŐTLENÍTŐKET BIZTONSÁGOSAN. HASZNÁLAT ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A CÍMKÉT ÉS A TERMÉKLEÍRÁST.**  
**MINDIG KÖVESSE AZ ORVOSI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ CÉGEK TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓIT ÉS IRÁNYELVEIT.**

JBN210187